



SenSura[®] Mio 1-piece urostomy


Pictorial guide

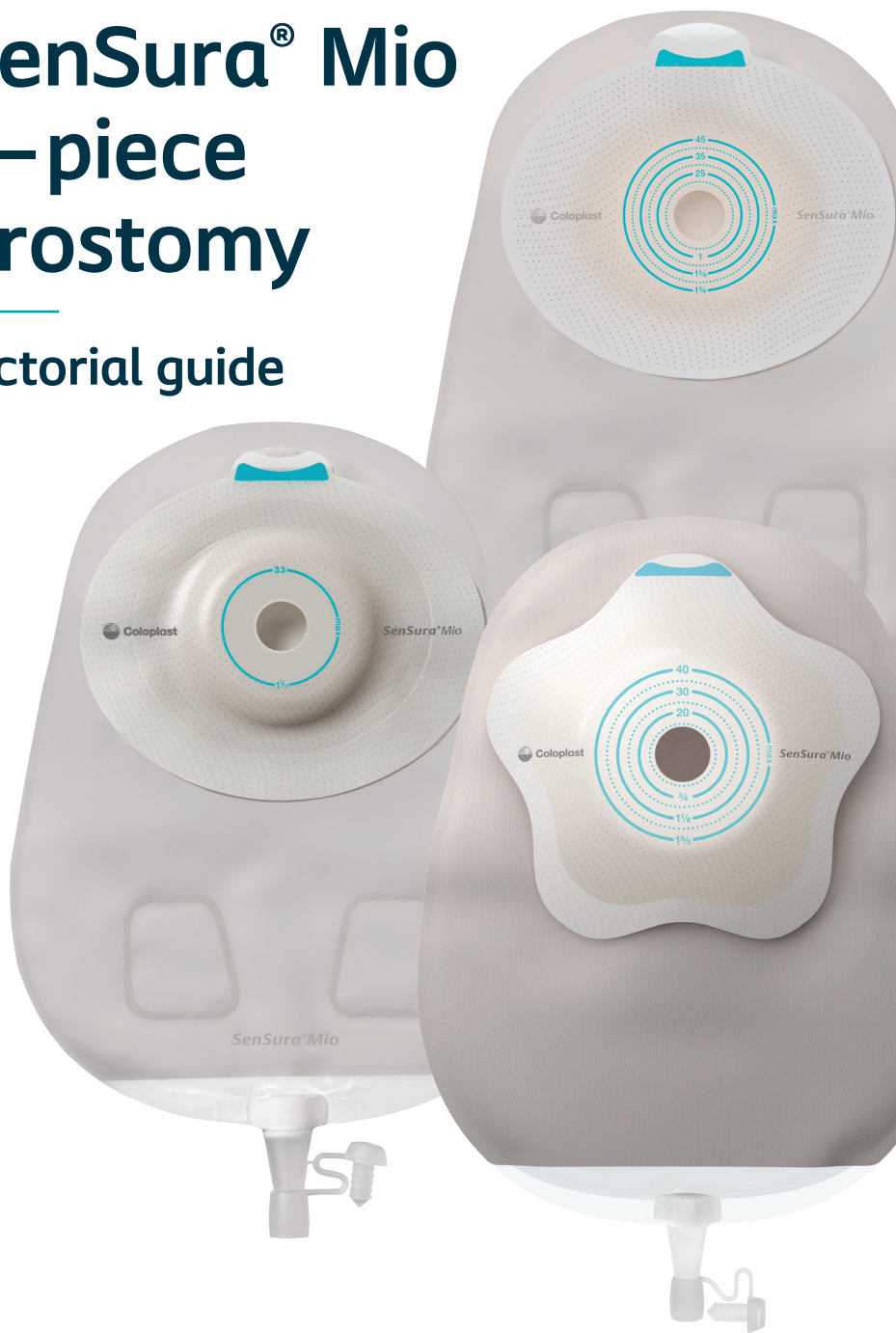


Prepare

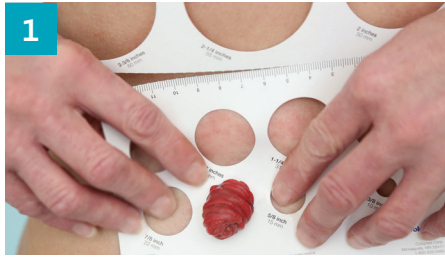

Measure the stoma.

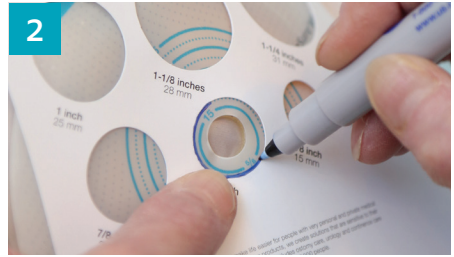

Trace measurement onto back of the barrier.

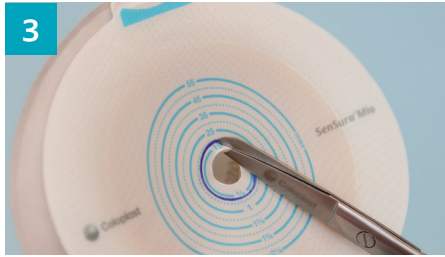

Cut opening in the barrier.



Remove protective backing by pulling the turquoise release tab away from the barrier.

Apply



Clean stoma and surrounding skin with water and a clean cloth, removing any residue. Skin should be clean and dry before applying the barrier.



Before applying the pouch, check to ensure the outlet has been securely fastened (plug to close). Apply pouch around the stoma.



Secure the barrier by applying gentle warming hand pressure to ensure that the adhesive has made full contact with the skin. Run a finger all the way around the stoma then move outwards to the edges.

Empty

1



Estimating urostomy pouch contents

Empty when 1/3 full

Empty or remove the pouch when it's 1/3 to 1/2 full*.

2



Empty the urostomy pouch by holding the end of the outlet upwards. Pinch spout to control drainage and remove the plug. Direct the spout and release to drain.

3



The Coloplast urostomy night bag can be attached for bedside drainage. If using a different drain bag, you may need an adaptor.

Remove

1



Gently remove the barrier by pulling the white removal tab away from the abdomen while gently pushing on the skin to help with removal.

Scan the QR code to view the how to use video



For product support, call the Coloplast Consumer Care Team at 1-877-858-2656.

Prior to use, please refer to product labeling for complete product instructions for use, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

*Per the Wound, Ostomy & Continence Nurse Society guideline: Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. (2014). *Urostomy products and tips: Best practice for clinicians*. Mt. Laurel, NJ. Author.

Bolsa de urostomía de 1 pieza SenSura® Mio 1

Guía ilustrada




SenSura® Mio

 Coloplast


Preparar



Mida el estoma.

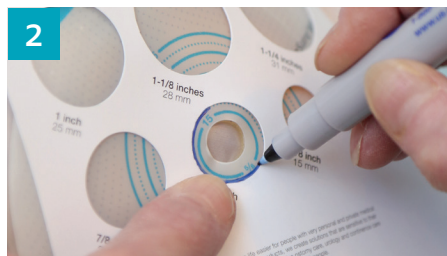

Marque la medición en la parte trasera de la barrera.

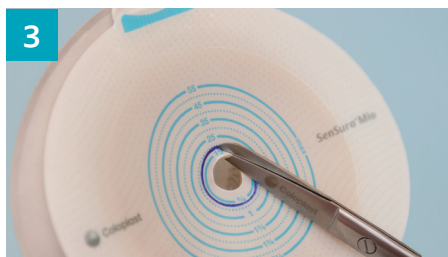

Corte una abertura en la barrera.



Retire el reverso protector tirando de la pestaña de liberación de color turquesa en dirección opuesta a la barrera.

Aplicar



Limpie el estoma y la piel circundante con agua y un paño limpio, y elimine cualquier residuo. La piel debe estar limpia y seca antes de aplicar la barrera.



Antes de aplicar la bolsa, verifique que la salida se haya ajustado firmemente (tiene un tapón para cerrarla). Aplique la bolsa alrededor del estoma.



Fije la barrera aplicando una suave presión y calor con la mano para asegurarse de que el adhesivo se pegue por completo en la piel. Pase un dedo alrededor del estoma y luego en los bordes.

Vaciar

1



Cómo estimar el contenido de la bolsa de urostomía

Vacíe cuando esté un tercio llena

Vacíe o quite la bolsa cuando alcance un tercio o la mitad de su capacidad.

2



Vacíe la bolsa de urostomía sosteniendo el extremo de la salida hacia arriba. Pellizque el pico para controlar el drenaje y retire el tapón. Dirija el pico y suelte para drenar.

3



La bolsa de urostomía para la noche de Coloplast puede fijarse a un lado de la cama para el drenaje. Si se usa una bolsa de drenaje diferente, es posible que necesite un adaptador.

Antes de usar el producto, consulte la etiqueta para conocer las instrucciones completas para el uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los eventos adversos.

*Según los lineamientos de la Wound, Ostomy & Continence Nurse Society: Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. (2014). *Urostomy products and tips: Best practice for clinicians*. Mt. Laurel: NJ. Author.

El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S. © 2023-10. Todos los derechos reservados Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411 / 1-800-533-0464. PM-03213 M6121N

Quitar

1



Retire con cuidado la barrera tirando de la pestaña blanca en dirección opuesta al abdomen mientras presiona suavemente la piel para ayudar a la extracción.

Escanee el código QR para ver cómo usar el video



Para obtener soporte del producto, llame al Equipo de atención al consumidor de Coloplast al 1-877-858-2656.